

Anti-triltafel PCE-AVT 1

Anti-triltafel voor nauwkeurige weegresultaten / marmeren plaat / constructiestaal gelakt / tafel breedte 770mm / tafelblad gelakte MDF-plaat.

Deze anti-triltafel helpt trillingen te dempen en zorgt daarmee voor een nauwkeuriger en snellere meting. De anti-triltafel bestaat uit twee gecombineerde tafels. Een van deze tafels is met een zware marmeren plaat uitgerust en is daarmee door de traagheid van de massa minder gevoelig voor trillingen. De ingebouwde anti-triltafel heeft een granieten plaat en heeft afmetingen van 270 x 410mm en weegt ca. 34kg. Vooral bij micro-wegingen / analyse-wegingen en precisie wegingen is de anti-triltafel zeer nuttig. Mocht u vragen hebben over de Anti-triltafel PCE-AVT 1, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze anti-triltafel en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- Ca. 34 kg marmeren plaat
- Constructie uit gelakt staal
- Tafel oppervlak is gemaakt van gelakte MDF-plaat
- Werkhoogte ca. 815mm
- Anti-triltafel breedte 770 mm
- Weegschaal oppervlak 270 x 410 mm


Technische specificaties van de Anti-triltafel PCE-AVT 1

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Werkhoogte	815 mm \pm 10 mm
Tafelbreedte	770 mm
Tafeldiepte	650 mm
Tegengewicht	34kg marmeren plaat
Vloeroppervlak	270 x 410 mm
Tafelplateau	MDF-plaat gelakt
Constructie	Staal, gelakt
Totaal gewicht	ca. 55 kg
Levering	Vrachtwagen

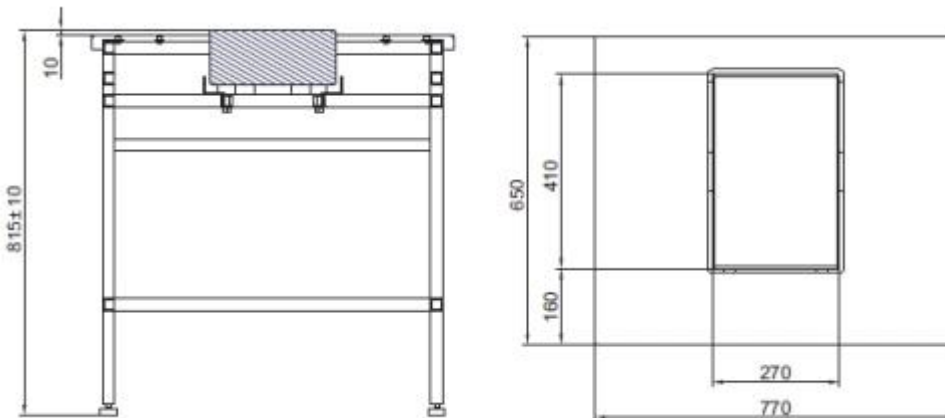

Hier ziet u de afmetingen van de Anti-triltable PCE-AVT 1



Anti-triltable PCE-ACT 1 met een Analyse-weegschaal van de PCE-AB Serie

Inhoud levering

1x Anti-triltable PCE-AVT 1, 1x marmeren steen, 1x handleiding

